


Matelas Nausiflow 834



Principalement recommandé dans le cadre de la prévention et/ou de l'aide au traitement de tous types d'**escarres constituées (suivant avis médical) de stade 1 à 4.**

Alimentation en air : connecteur PM 3 voies muni d'un bouchon de transport.

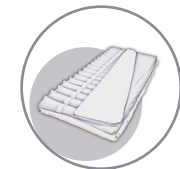

Housse intégrale : entièrement zippée, conçue en polyuréthane bi-élastique imperméable aux liquides, traité aux ions d'argent (Ag+). Lavable à 95°C.



Base : réalisée en polymesh haute résistance.



CPR : permet un dégonflage total en ± 15 secondes.



Cellules : 20 doubles cellules en Nylon/PU indépendantes et déconnectables d'une hauteur d'air de 20 cm au total (10+10) dont 8 à faible perte d'air.



Elastiques de fixation : 4 élastiques de fixation situés aux angles permettent de solidariser le matelas au sommier ou de le maintenir enroulé.

Avantages

- **Matériaux hauts de gamme :** pour un confort maximal et une durabilité prolongée.
- **Gaine passe-câble :** protège le câble d'alimentation.
- **Cellules de tête statiques :** pour un maintien de tête confortable et stable
- **Cellules Flow-air :** microperforations réduisant l'effet thermique de la sudation.
- **Connecteurs rapides à fermeture automatique :** Déconnection rapide des cellules (idéal pour les décharges talonnière).
- **Double cellule :** 10 cm d'air alterné + 10 cm d'air statique confiné (soutien constant).

Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Compresseurs conseillés*

- Nausiflow 2S
- Nausiflow 100 AUTO QUATTRO
- R'GO SOINS
- Nausiflow 100 MAXI 2

Dimensions disponibles : 200 x 85, 200 x 120
Références : NA834-MAT85-PM, NA834PU-MAT120-PM

*Selon la largeur du matelas utilisé



De 30 à 200 kg