

Matelas Nausiflow 1034


Principalement recommandé dans le cadre de la **prévention et/ou de l'aide au traitement de tous types d'escarres constituées¹** (suivant avis médical) de stade 1 à 4.

CPR : permet un dégonflage rapide en plus ou moins 15 secondes.

Housse intégrale : entièrement zippée, conçue en polyuréthane bi-élastique imperméable aux liquides, traité aux ions d'argent (Ag+). Lavable à 95°C.

Elastiques de fixation : 4 élastiques de fixation situés aux angles permettent de solidariser la matelas au sommier ou de le maintenir enroulé.

placement

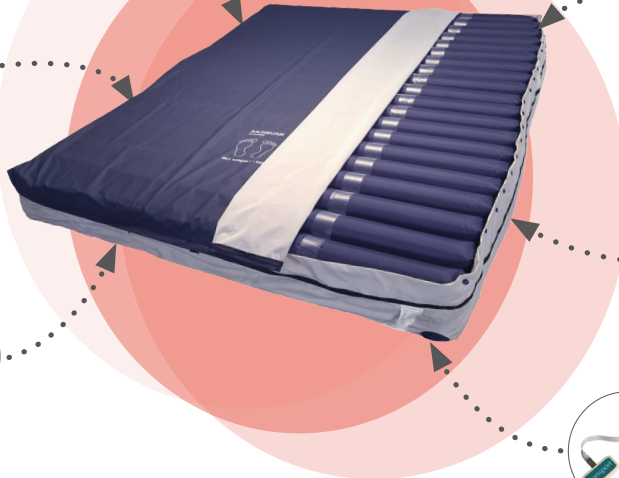

Cellules : 8 cellules à faible perte d'air en zone thoracique pour diminuer l'effet thermique de la sudation.



Base : réalisée en polymesh haute résistance.



Alimentation en air : connecteur PM 3 voies muni d'un bouchon de transport.



Avantages

- **Adaptation morphologique** : conçu spécifiquement pour les morphologies bariatriques.
- **Matériaux haut de gamme** : pour un confort prolongé et une fiabilité à long terme.
- **Technologie Flow-air** : microperforations réduisant l'effet thermique de la sudation.
- **Cellules de tête statiques** : pour un maintien de tête confortable et stable.
- **Double cellule innovante** : 15 cm d'air alterné + 10 cm d'air statique confiné (soutien constant).
- **Gaine passe-câble intégrée** : Protection du câble d'alimentation.
- **Connecteurs rapides** : Déconnection rapide des cellules (idéal pour les décharges talonnière).



Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Références : NA1034PU-MAT120-PM
NA1034PU-MAT140-PM



Compresseur conseillé

- Compresseur 100 Maxi 2



Matelas 120 cm > 350 kg
Matelas 140 cm > 450 kg

GARANTIE

2 ANS

CE

