

# Compresseur Nausiflow 100 Auto Quattro



**Quatre modes thérapeutiques :** pour répondre aux recommandations individuelles des patients.

- **Dynamique :** cycle d'alternance des pression toutes les 12 minutes afin d'éviter la compression vasculaire prolongée.
- **Stimulation :** déclenche une vasodilatation réflexe favorisant le bourgeonnement (uniquement en phase de cicatrisation).
- **Progressif :** mode dynamique à cycle aléatoire pour éviter une accoutumance au support.
- **Statique :** stabilité du support recommandé en cas de traumatisme divers et douleur liée, pour favoriser le

**Trois Alarmes :**

- **Alarme visuelle et sonore basse pression :** en cas de fuite et/ou mauvais raccordement.
- **Alarme visuelle Maintenance :** indique que la pompe nécessite une maintenance.
- **Alarme visuelle\* et sonore\* défaut interne :** indique tous problèmes internes (logiciel ou autre) (\*autre qu'alarme basse pression).

**Maintien automatique de la pression :**

Système maintenant et ajustant automatiquement la pression pour conserver un niveau constant et adapté aux besoins du patient.

**Réglage digital :**

Interface numérique précis pour une meilleure visibilité des paramètres choisis.

**Quatre réglages de confort :**

Options de confort personnalisables pour répondre aux préférences individuelles des patients.


**Verrouillage/Déverrouillage :**

Verrouillage automatique du panneau de commande.

**Mode soins :** plan ferme temporisé à 30 minutes pour faciliter les soins, le repositionnement et les transferts du ou vers le lit.

**Pompe silencieuse :**

Fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal.

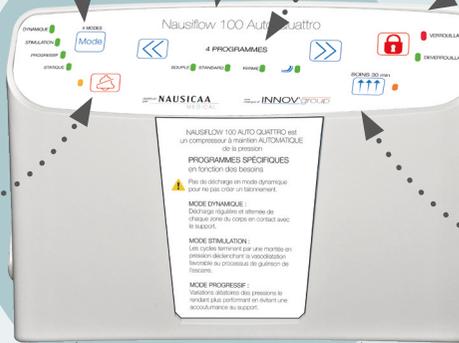

## Avantages

- **Confort personnalisé :** quatre niveaux de réglage pour un confort optimal.
- **Facilité d'utilisation :** interface digitale intuitive pour une utilisation simple et rapide.
- **Adaptabilité :** son interface digitale permet une adaptation selon l'état de confort du patient, sa position (assise) et/ou des besoins (mode soins) le tout étant agrémenté par son Maintien Automatique de la Pression.
- **Fiabilité :** conception robuste et durable pour une utilisation à long terme.
- **Filtre à air :** externe pour un accès, un contrôle ou un remplacement aisé
- **Pompe Silencieuse :** fonctionnement à faible bruit (< 28 dB) pour un confort optimal

## Applications

- Utilisation à domicile.
- Hôpitaux et établissements de soins de longue durée ou courte durée.
- Cliniques de rééducation et centres de soins spécialisés.

Références : NA100QTOM-COMP-PM

## Matelas conseillés

- Nausiflow 512 en 70, 88 cm
- Nausiflow 834 en 85 cm



De 30 à 200 kg